


目录

| | |
|---------------------------------|----------|
| PRESTAN 自动体外除颤 培训器 | 2 |
|---------------------------------|----------|

PRESTAN 自动体外除颤 培训器

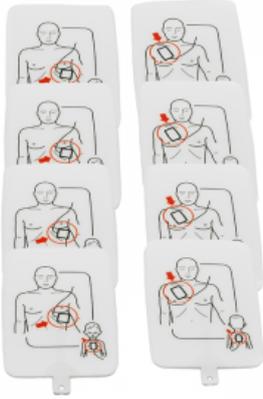

PRESTAN自动体外除颤超级培训器电极板（4对/袋）

SKU: PP-UTPAD-4

PRESTAN自动体外除颤超级培训器（成人/儿童）替换电极贴片套装，4件式包装（总共8片电极贴片）。

PRESTAN专业自动体外除颤超级培训器电极贴片非常经久耐用，设有电极贴片感应系统，让学员确认电极贴片是否有稳固在模拟人身上。采用的硅基粘合剂，容易粘贴及移除，这有助于延长模拟人表层的寿命。

特点:

- 双图形（成人/儿童）培训用电极贴片。
- 电极贴片感应系统。
- 预先连接的电极贴片。





PRESTAN专业自动体外除颤培训器遥控器


SKU: PP-AEDT-100-R

适用于PRESTAN专业自动体外除颤培训器□PRESTAN专业自动体外除颤培训器遥控器，使用2节AA电池。遥控器允许导师选择预设场景，暂停以给予指导，以及恢复进行中的场景。

特点:

- 设置按钮。
- 装置控制按钮。
- 模拟电极贴片松脱。
- 在心肺复苏进行中，启动“深按”模式。
- 暂停。
- 播放。
- 发出预设场景。



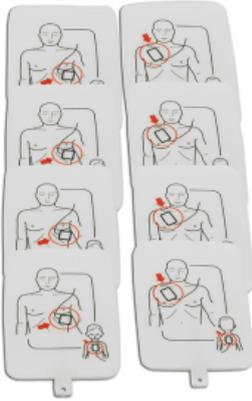

PRESTAN专业自动体外除颤培训器升级电极板

SKU: PP-APAD2-4

PRESTAN 专业高性能培训用电极贴片设有精准解剖学界标图像及持久耐用的粘合力。

此电极贴片采用和真实AED电极贴片同样的泡沫材料制作，可和市面上所有的模拟人配合使用。此电极贴片采用的硅基粘合剂，其泡沫结构能确保使用在模拟人身上时，容易粘贴及移除。

产商表示这贴片可在AED培训课程上，使用至少25次，但是我们已经用了远远超过这个数字。此AED培训用电极贴片采用拉链式的塑料袋包装。一旦连接，就要保持干净，并以培训用电极贴片收纳盒收藏。

***此电极贴片仅用于培训目的，不可使用于真正的除颤电击。**

特点:

- 适合PRESTAN自动体外除颤培训器。
- 包括电极贴片感应器。
- 容易从模拟人身上移除及清理。
- 可与任何品牌的模拟人配合使用。
- 不含乳胶的硅基粘合剂。





PRESTAN专业自动体外除颤培训器升级版

SKU: PP-AEDT2-101

质量/耐用性/最接近真实的自动体外除颤器

- 此领先的自动体外除颤培训器，体积重量和真实AED相仿，给于高素质的真实体验。
- 可客制化选项来配合培训环境，包括儿童培训按钮。
- 清晰自信的语音提示。此外，也备有心肺复苏节拍提示，让学员容易跟上胸外按压速率。
- 可替换式的语言模块备有双语选择，并涵盖心肺复苏最新指南。
- 导师可自由选择是否要使用遥控器。在特定范围内，一个遥控器可控制多台自动体外除颤培训器。



转换语言设置只需一个简单的按钮。



场景模式按钮可迅速转换电击顺序（无须手动操作）。



三种音量选择：响亮，中等，柔和。



播放和暂停键来控制欲特别指导的时刻。

特点:

- 符合2015美国心脏协会[AHA]最新指南。
- 简单迅速的更新升级。
- 成人/儿童选择键。
- 双图形成人/儿童培训用电极贴片。
- 当进行点击时，电击按钮将会闪出亮光。
- 五种预设培训场景设置，配有清晰平稳的语音提示。
- 以提示音计算和提示，胸外按压速率的节拍。
- 全自动或半自动电击。
- 可选择设置或不设置胸外按压循环周期完成后的呼吸次数。
- 可购买遥控器（单独出售）。
- 电池寿命长，备有自动关机设置。
- 可替换的语言模块。
- 坚固的翻盖开口。





PRESTAN自动体外除颤超级培训器

SKU: PP-AEDUT-101

此款为培训用自动体外除颤器(AED)PRESTAN创造了首个,也是唯一一个全球通用的自动体外除颤培训器,符合2015指南,可依据指南进行更新升级。

PRESTAN自动体外除颤超级培训器设有双图形电极贴片,和独特的电极贴片感应系统,可自动感应电极贴片在模拟人身上的粘贴位置。此培训器将展现AED施救的真实状况,让学员能有逼真的培训体验。

此电极贴片持久耐用,可使用高达100次,也不会残留任何沾粘物。更换过程简单,价格非常实惠。

PRESTAN专业AED超级培训器是市面上唯一一个拥有“婴儿”按键的AED训器。这将让学员能体验具有真实感的培训。

容易操作的语音化菜单,让您能自行设定您的培训课程为全自动或半自动电击,一共有五种培训场景设置让您选择。同时,您可以选择开启或关闭心肺复苏胸外按压速率提示和人工呼吸指令。

特点:

- PRESTAN创造了首个,也是唯一一个全球通用的自动体外除颤培训器,符合2015指南,可依据指南进行更新升级。
- 播放/暂停键。
- 五种培训场景设置。
- 双图形(成人/儿童)培训用电极贴片。
- 电极贴片感应系统。
- 预先连接的电极贴片。
- 儿童培训按钮。
- 儿童AED特定语音提示。
- 全自动或半自动电击模拟情景。
- 心肺复苏培训“施行人工呼吸”语音提示。
- 开启或关闭胸外按压速率节拍提示。
- 开启或关闭“施行人工呼吸”语音提示。
- 电池电量低警告。



索引

P

- PRESTAN专业自动体外除颤培训器升级版 4
- PRESTAN专业自动体外除颤培训器升级电极板 3
- PRESTAN专业自动体外除颤培训器遥控器 2
- PRESTAN自动体外除颤超级培训器 6
- PRESTAN自动体外除颤超级培训器电极板（4对/袋） 1