

目录

PRESTAN 心肺复苏 模拟人 2

PRESTAN 自动体外除颤 培训器 23

PRESTAN 心肺复苏 模拟人

PRESTAN 专业成人型模拟人2000系列

SKU: PP-AM-2000-1-MS

新专业成人型模拟人2000系列



同样高质量、逼真的专业成人模拟人现已配备高级反馈功能，包括速率、深度、回弹、通气、无按压时间和胸部按压分数。这些反馈通过蓝牙®支持的 PRESTAN 心肺复苏反馈应用程序提供，可在苹果和安卓设备上使用。

完全符合当前行业指南，包括加拿大心脏与中风基金会 2021 年 2 月发布的复苏培训课程中使用反馈设备政策以及最近的 AHA 综合反馈指令。

提供中肤色或深肤色选择，仅配备心肺复苏反馈功能，并有单个或 4 个包装配置。

所有 PRESTAN 心肺复苏培训模拟人均在美国制造。

https://prestan-china.com/wp-content/uploads/2021/04/2021-02-19-mm-prestan-products-series-2000-sales-v5_3.mp4

其他相关信息：重新设计的 PRESTAN 心肺复苏反馈应用程序

通过蓝牙®连接提供高质量、实时、先进的心肺复苏反馈，适用于“新升级”的 PRESTAN 专业成人型模拟人2000系列。


高级心肺复苏反馈（包括速率、深度、回弹、通气、无按压时间和胸部按压分数）被监控、轻松显示并可用于报告，帮助学生自我监控表现并在心肺复苏培训中建立信心。

该应用允许讲师对多达(6)名学生进行全面心肺复苏培训，同时监控心肺复苏表现，并配备报告功能，可直接从应用程序下载心肺复苏培训结果。


重新设计的 PRESTAN 心肺复苏反馈应用程序提供了：

- 改进的用户体验
- 更简单的设置 - 无需校准呼吸
- 更直观的心肺复苏反馈 - 增加了胸部按压分数
- 可用语言列表扩展

当前支持的语言包括：德语、英语（国际）、英语（美国）、西班牙语、法语、意大利语、荷兰语、俄语、韩语、阿拉伯语、马来语、泰语、越南语、白俄罗斯语、克罗地亚语、捷克语、丹麦语、芬兰语、希腊语、匈牙利语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、土耳其语、乌克兰语和中文。

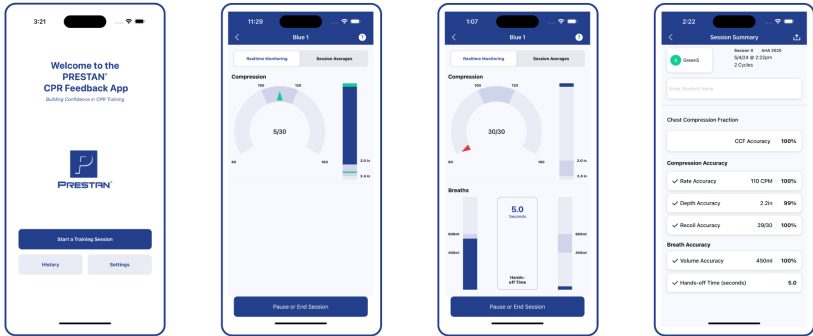

通过扫描以下二维码便可下载“重新设计”的 PRESTAN心肺复苏反馈应用程序。

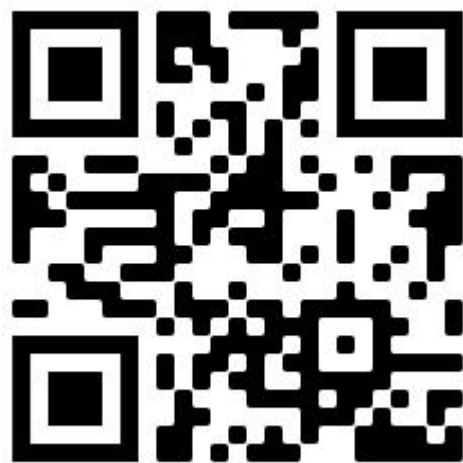

PRESTAN心肺复苏反馈应用程序符合AHA仪器化指令反馈装置IDFD的最新要求。同时也符合加拿大心脏和中风基金会2021年2月的《反馈装置在复苏培训课程中使用之政策》。

本设备符合 FCC 第 15 部分规则。操作需满足以下两个条件：(1) 本设备不会造成有害干扰；(2) 本设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰FCC ID# QOQ-BGM220S2 / FCC ID# 2ASY3AK2G-PA

新PRESTAN专业成人型模拟人2000系列心肺复苏速率显示器 LED 序列

PRESTAN 模拟人2000系列LED序列表

	连接模式	断开模式
睡眠模式/无电源连接		
智能设备连接模式 (从左到右依次循环)		无
第一次完整按压，未连接模式 (唤醒模式/LED测试模式)	无	
CPM* < 60		
CPM* 60 - 79		
CPM* 80 -99		
CPM* 100 - 120		
CPM*> 120		
按压停止		

* CPM = 每分钟按压率
 = 闪烁

结合安装在肩部的 PRESTAN 传统心肺复苏反馈信号灯系统，模拟人2000系列提供了一种独特的双用途培训方案，为讲师提供高级版或基础版反馈训练的选择。

视觉反馈装置为学生提供了每分钟实施 100 - 120 次按压的真实感受。信号灯会持续显示按压速率的进展，确认按压是否在行业指南推荐的 100 - 120 次/分钟范围内。如果超过120 次/分钟的上限，黄灯将闪烁，提醒学生放慢速度。讲师可以快速且轻松地监控多个学生的表现。

除了视觉反馈装置，当胸外按压达到2.0-2.4英寸的深度时，学员会听到提示音，让他们实际体验胸外按压所需的准确力度。

2000系列附加套件


PRESTAN专业成人型模拟人2000系列附加套件为讲师提供了升级现有 PRESTAN 专业成人型和下颌推举模拟人以增加新高级反馈参数的选项。

PRESTAN 成人型2000系列附加套件推荐用于 2018 年及之后的模拟人型号。

请注意：最新版本的2000系列附加套件包含连接到白色通气管末端的蓝色连接器；然而，安装步骤保持不变。

2000系列肺袋

PRESTAN 专业成人型系列 2000系列肺袋使用了相同的易于安装的 PRESTAN 设计，并新增了呼吸传感器。2000系列肺袋是通过 PRESTAN 心肺复苏反馈应用程序提供通气反馈的必要组件。

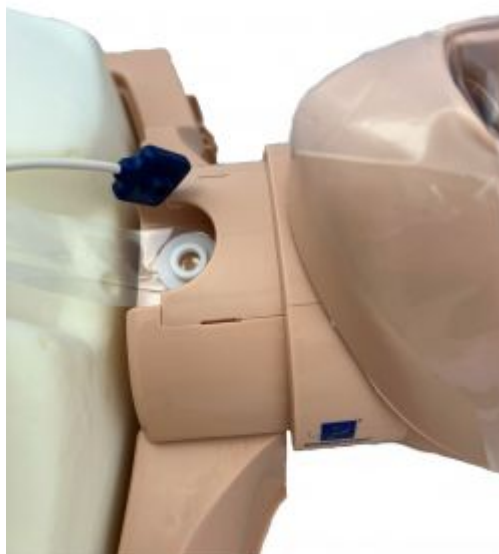



PRESTAN ULTRALITE® 超轻巧型模拟人

SKU: PP-ULM-100-MS

这是PRESTAN系列产品中最轻便携带的心肺复苏模拟人！非常容易安装，轻巧的包装设计，适合用于随时随地进行培训。这款非常实惠耐用的模拟人不含乙烯基和乳胶。这是负担得起，且又具有高品质保证的心肺复苏培训工具□PRESTAN极佳品质，绝不让您失望。

特点:

- 独有的快速简易安装。
- 可堆叠的躯干与头部，更节省空间，容易携带。
- 躯干拥有翻盖式开口，更容易快速地安装肺袋。
- 逼真的皮肤设计，可防尘、防污垢和油脂。
- 宽敞的胸腔部位提供足够的空间，放置AED电极贴片及进行培训。
- 显而易见的解剖学界标，加强胸外按压手按位置的准确性。
- 头部倾斜度给予学员清楚指标，只有采用正确的仰头提颏法，才能打开呼吸道，让胸腔鼓起。
- 经过50万次胸外按压的寿命测试。
- 模拟人容易清理。



PRESTAN专业超轻巧型心肺复苏面罩/肺袋50片装

SKU: PP-ULB-50

此面罩/肺袋可在心肺复苏培训时，给予非常逼真的胸腔起伏体验。此肺袋只适用于PRESTAN专业超轻巧型心肺复苏模拟人。

此配套包含50个肺袋。完美设计，非常轻易就可置入一个肺袋。折起，置入您就可以开始培训。

特点:

- 容易置入。
- 适用于PRESTAN专业超轻巧型心肺复苏模拟人。
- 无需其他工具来置入。



PRESTAN专业婴儿型心肺复苏面罩/肺袋50片装

SKU: PP-ILB-50

模拟人替换面罩 / 肺袋。

特点:

- PRESTAN 模拟人替换面罩/肺袋。
- 透明塑料可充气肺袋。
- 容易置入。
- 一次性使用。





PRESTAN专业儿童型心肺复苏面罩/肺袋50片装

SKU: PP-CLB-50

模拟人替换面罩 / 肺袋。

特点:

- PRESTAN 模拟人替换面罩/肺袋。
- 透明塑料可充气肺袋。
- 容易置入。
- 一次性使用。





PRESTAN专业儿童型心肺复苏面罩50片装

SKU: PP-CFS-50

在课堂内，如果模拟人是超过一个学员同时使用，有必要在保护学员和提供真实体验之间取得平衡。

这是50片装配给PRESTAN专业心肺复苏模拟人的过滤面罩。如果在培训课上，学员共同使用一个模拟人，您可采用过滤面罩来减低交叉感染的风险□PRESTAN面罩让这项任务更为简单，因为固定式面罩不会滑落。完全无需粘合！你的学员可以更专注，并把时间用在真正的技能训练上。

每个心肺复苏/自动体外除颤器的导师都希望能在培训时，给予学员最逼真的心肺复苏经验，从而达到培训的最大果效。以此面罩覆盖模拟人的脸部，可让每个学员在良好保护下练习心肺复苏，同时还可以体验非常真实的胸腔起伏。50片装面罩配给PRESTAN儿童心肺复苏模拟人。

特点:

- PRESTAN产品：专业儿童面罩（50片装）。
- 非采用天然乳胶制作。





PRESTAN专业成人型心肺复苏面罩/肺袋50片装

SKU: PP-ALB-50

模拟人替换肺袋。

特点:

- PRESTAN模拟人替换肺袋。
- 透明塑料可充气肺袋。
- 容易置入。
- 一次性使用。





PRESTAN 复苏罩接合器

SKU: 10076-PPA

采用此价格实惠的一次性接合器来取代昂贵的面罩阀门，更节省培训开销。具有植入式空气过滤器，可防止循环污染。适用于所有复苏罩 (内径15mm 或 外径22mm)□

***仅用于培训目的。**

特点:

- 具有植入式空气过滤器，可防止循环污染。
- 适用于所有复苏罩
- 不包括复苏罩





PRESTAN ULTRALITE® 超轻巧型 模拟人 4 件组合装

SKU: PP-ULM-400-MS

PRESTAN 专业培训用模拟人系列超群出众，与市面上的模拟人大为不同。独特设计给予高质感的真实体验，可以单一购买或选择4件组合套装，适用于小组培训。模拟人的设计旨在提供最具真实感的心肺复苏体验。

PRESTAN Ultralite® 超轻巧型模拟人非常容易安装，4件组合轻巧的包装设计，可让您随时随地进行培训。这款非常实惠耐用的模拟人，是绝佳的心肺复苏培训工具。PRESTAN品质保证，绝不让您失望。

特点:

- 可堆叠的躯干与头部，更节省空间，方便携带。
- 精准解剖学界标，包括剑突。
- 经过50万次胸外按压的寿命测试。
- 使用肺袋时，清楚可见的胸腔起伏。
- 可与AED培训器电极贴片配合使用。



PRESTAN 成人型模拟人4 件组合套装

SKU: PP-AM-400M-MS



PRESTAN专业培训用模拟人系列超群出众，与市面上的模拟人大为不同。独特设计给予高质感的真实体验，可以单一购买或选择4件组合套装，适用于小组培训。模拟人的设计旨在提供最具真实感的心肺复苏体验。

PRESTAN成人型专业模拟人无论在视觉或触觉上都具真实感。设计独特的翻盖式开口，更容易快速安装面罩和肺袋。

Prestan革新的心肺复苏速率显示器给于导师与学员实时反馈，显示学员是否有掌握正确的胸外按压速率。此仪器可个别测量每个学员的心肺复苏按压速率，并允许导师同时观察几个学员。

透过我们获得专利的仰头提颏法□Prestan专业成人模拟人可模拟在真实情况下，需施行心肺复苏患者的头部会如何转动。

加上我们模拟人的特有机制，可帮助学员使用恰当的力度和速度进行胸外按压。附有50片A/C面罩膜和肺袋，及1个锦龙手提箱。

特点:

- 高度仿真的特征和重量让成人/儿童心肺复苏培训更具真实感。
- 外形与皮肤的触感都栩栩如生，能帮助学员更容易投入真实的救援行动。
- 设计独特的翻盖式开口，更容易快速安装面罩和肺袋。
- 心肺复苏反馈显示器给于导师和学员实时反馈，显示学员的胸外按压速率。
- 包括4个配有心肺复苏反馈显示器的模拟人，面罩和肺袋，以及锦龙手提箱。



PRESTAN 婴儿型模拟人4 件组合套装

SKU: PP-IM-400M-MS



这款符合AHA标准的4件装PRESTAN婴儿型模拟人（中等肤色）配有按压深度提示音反馈装置和按压速率反馈显示器。

这款4件装模拟人设有两个独立反馈装置，将让您的培训课程发挥最大果效。学员的按压深度达标就会有提示音出现，按压速率则有LED指示灯提示。附加商品为：50个婴儿肺袋，一份说明书，和一个锦纶手提箱。

通过PRESTAN 专业的革新技术，婴儿型心肺复苏模拟人附加了速率显示器。LED指示灯让导师和学员都能得到即时的反馈，确定他们的胸外按压速率是否正确。导师可以非常轻易地同时观察好几位学员，而学员则可直接看到他们的按压速率，从中自我调整，再以正确的技巧不断加强练习。

按压深度也是非常关键的技能。学员可透过模拟人的提示音来判断自己是否达到标准的按压深度，并从中学习。当按压深度符合ECC建议的深度，模拟人的提示音能让学员知道他们已经达到目标。正确的按压速率和深度，对学习心肺复苏来说是两个非常重要的达标元素。透过Prestan的视觉与听觉提示，将强化学员心肺复苏的技能，让他们更据信心去执行急救任务。

特点:

- 设在婴儿尿布上的LED指示灯，让导师和学员得到胸外按压是否达标的实时反馈。
- 这个按照真实比例制作的婴儿模拟人100%不含乳胶，并有可揉捏的鼻子。“轻拍足部”提醒学员检查患者的意识状态 – 可轻易完成任务，因为模拟人已有完整的双脚。可转动的双臂甚至可以进行脉搏检查。
- 以拍打婴儿背部上方，练习婴儿哽塞拍背法。
- 容易安装的肺袋缩短模拟人的装置时间。
- 固定式面罩不会滑落，完全无需粘合。
- 仿真的皮肤可防尘、污垢、油脂，甚至来自AED电极贴片的沾粘物！
- 清晰的解剖学界标，精准标明锁骨、乳头线、胸骨和剑突等位置。这有助于学员练习哽塞急救技巧，并加强手指正确的按压位置。
- 可倾斜的头部可展示如何正确打开呼吸道，让每个学员观察，在真实情况下采用对的仰头提颏法，胸腔将是如何起伏。
- 婴儿头部设计可用于示范下颌推出法。
- 提示音机制提高学员在掌握胸外按压力度和深度的信心。
- 模拟人可根据CDC指南进行清理。





PRESTAN 儿童型模拟人

SKU: PP-CM-100M-MS

PRESTAN 专业儿童型模拟人的设计与成人模拟人相比，其身体结构更轻柔，脸部特征也更贴近孩童。比PRESTAN 专业成人型模拟人更瘦小。无论在视觉或触觉上都具真实感。

特点:

- 高度仿真的模拟人更容易被导师与学员接受。
- 方便携带，可轻易快速地在培训场地完成安装。
- 获得专利的仰头提颏法可模拟在真实情况下，患者需施行心肺复苏时的头部转动，来教导学员如何正确的打开呼吸道。
- 容易安装的面罩和肺袋，让胸腔会明显起伏，确保学员可体验最精准及真实的训练。
- 固定式面罩不会滑落，完全无需粘合。
- 此模拟人配置心肺复苏反馈显示器。
- PRESTAN模拟人非采用天然乳胶制作。





PRESTAN 婴儿型模拟人

SKU: PP-IM-100M-MS

高度仿真的特征和重量让婴儿心肺复苏培训更具真实感。外形与皮肤的触感都栩栩如生，能帮助学员更容易投入真实的救援行动。完全模拟真实婴儿头部转动的方式。脸部和头部的倾斜度，加强心肺复苏培训的学习经验，让学员明白在施行心肺复苏时如何正确的打开呼吸道。可单一购买或选择4件组合套装。

特点:

- 高度仿真的模拟人更容易被导师与学员接受。
- 方便携带，可轻易快速地在培训场地完成安装。
- 获得专利的仰头提颏法可模拟在真实情况下，患者需施行心肺复苏时的头部转动，来教导学员如何正确的打开呼吸道。
- 容易安装的面膜和肺袋，让胸腔会明显起伏，确保学员可体验最精准及真实的训练。
- 固定式屏障面膜不会滑落，完全无需粘合。
- 模拟人配有心肺复苏反馈显示器 – 显示器可个别购买，并轻易安装于无显示器装置的PRESTAN专业模拟人。
- PRESTAN模拟人非采用天然乳胶制作。



PRESTAN 心肺复苏模拟人收藏系列

SKU: PP-FM-300M-MS



PRESTAN专业培训用模拟人系列超群出众，与市面上的模拟人大为不同。独特设计给予高质感的真实体验，可以单一购买或选择4件组合套装，用于小组培训。模拟人的设计旨在提供最具真实感的心肺复苏体验。

在心肺复苏培训中，一个精准的反馈设置是非常重要的。Prestan革新的心肺复苏速率显示器给予导师与学员实时反馈，显示学员是否有掌握正确的按压深度。此仪器可个别测量每个学员的心肺复苏按压速率，并允许导师同时观察几个学员。设有独特机制，发出提示音提醒按压深度已达到标准。这将确保学员使用正确的力度进行心肺复苏胸外按压。

特点:

- 符合2015年 AHA心肺复苏指南的心肺复苏反馈显示器，适用于成人模拟人。
- 备有成人，儿童和婴儿三种型号
- 高度仿真的模拟人更容易被导师与学员接受。
- 方便携带，可轻易快速地在培训场地完成安装。
- 获得专利的仰头提颏法可模拟在真实情况下，患者需施行心肺复苏时的头部转动，来教导学员正确的打开呼吸道。
- 容易安装的屏障面膜和肺袋，让胸腔会明显起伏，确保学员可体验最精准及真实的训练。
- 固定式面膜不会滑落，完全无需粘合。
- PRESTAN模拟人非采用天然乳胶制作。



PRESTAN 心肺复苏模拟人家庭组合套装

SKU: PP-FM-500M-MS



PRESTAN专业培训用模拟人系列超群出众，与市面上的模拟人大为不同。独特设计给予高质感的真实体验，可以单一购买或选择4件组合套装，用于小组培训。模拟人的设计旨在提供最具真实感的心肺复苏体验。

在心肺复苏培训中，一个精准的反馈设置是非常重要的。Prestan革新的心肺复苏速率显示器给予导师与学员实时反馈，显示学员是否有掌握正确的按压深度。此仪器可个别测量每个学员的心肺复苏按压速率，并允许导师同时观察几个学员。设有独特机制，发出提示音提醒按压深度已达到标准。这将确保学员使用正确的力度进行心肺复苏胸外按压。

特点:

- 符合2015年 AHA心肺复苏指南的心肺复苏反馈显示器，适用于成人模拟人。
- 备有成人，儿童和婴儿三种型号
- 高度仿真的模拟人更容易被导师与学员接受。
- 方便携带，可轻易快速地在培训场地完成安装。
- 获得专利的仰头提颏法可模拟在真实情况下，患者需施行心肺复苏时的头部转动，来教导学员如何正确的打开呼吸道。
- 容易安装的面膜和肺袋，让胸腔会明显起伏，确保学员可体验最精准及真实的训练。
- 固定式面膜不会滑落，完全无需粘合。
- PRESTAN模拟人非采用天然乳胶制作。





PRESTAN 成人型模拟人

SKU: PP-AM-100M-MS


PRESTAN专业培训用模拟人系列超群出众，与市面上的模拟人大为不同。独特设计给予高质感的真实体验，可以单一购买或选择4件组合套装，适用于小组培训。心肺复苏模拟人的设计旨在提供最具真实感的心肺复苏体验。

特点:

- 符合2015年 AHA指南的心肺复苏反馈显示器。
- 具真实感的模拟人让导师和学员更容易投入学习。
- 方便携带，可轻易快速地在培训场地完成安装。
- 获得专利的仰头提颏法可模拟在真实情况下，患者需施行心肺复苏时的头部转动，来教导学员如何正确的打开呼吸道。
- 容易安装的面罩和肺袋，让胸腔会明显起伏，确保学员可体验最精准及真实的训练。
- 固定式面罩不会滑落，完全无需粘合。
- 模拟人配有心肺复苏反馈显示器 – 显示器可个别购买，并轻易安装于无显示器的PRESTAN专业模拟人。
- PRESTAN心肺复苏模拟人非采用天然乳胶制作。



PRESTAN 自动体外除颤 培训器

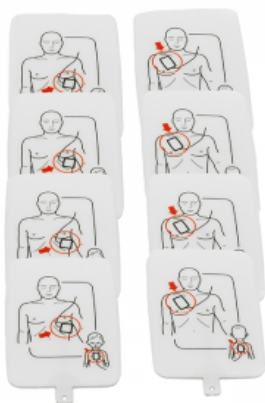

PRESTAN自动体外除颤超级培训器电极板（4对/袋）

SKU: PP-UTPAD-4

PRESTAN自动体外除颤超级培训器（成人/儿童）替换电极贴片套装，4件式包装（总共8片电极贴片）。

PRESTAN专业自动体外除颤超级培训器电极贴片非常经久耐用，设有电极贴片感应系统，让学员确认电极贴片是否有稳固在模拟人身上。采用的硅基粘合剂，容易粘贴及移除，这有助于延长模拟人表层的寿命。

特点:

- 双图形（成人 / 儿童）培训用电极贴片。
- 电极贴片感应系统。
- 预先连接的电极贴片。





PRESTAN专业自动体外除颤培训器遥控器


SKU: PP-AEDT-100-R

适用于PRESTAN专业自动体外除颤培训器□PRESTAN专业自动体外除颤培训器遥控器，使用2节AA电池。遥控器允许导师选择预设场景，暂停以给予指导，以及恢复进行中的场景。

特点:

- 设置按钮。
- 装置控制按钮。
- 模拟电极贴片松脱。
- 在心肺复苏进行中，启动“深按”模式。
- 暂停。
- 播放。
- 发出预设场景。



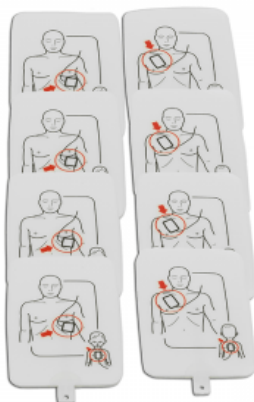

PRESTAN专业自动体外除颤培训器升级电极板

SKU: PP-APAD2-4

PRESTAN 专业高性能培训用电极贴片设有精准解剖学界标图像及持久耐用的粘合力。

此电极贴片采用和真实AED电极贴片同样的泡沫材料制作，可和市面上所有的模拟人配合使用。此电极贴片采用的硅基粘合剂，其泡沫结构能确保使用在模拟人身上时，容易粘贴及移除。

产商表示这贴片可在AED培训课程上，使用至少25次，但是我们已经用了远远超过这个数字。此AED培训用电极贴片采用拉链式的塑料袋包装。一旦连接，就要保持干净，并以培训用电极贴片收纳盒收藏。

***此电极贴片仅用于培训目的，不可使用于真正的除颤电击。**

特点:

- 适合PRESTAN自动体外除颤培训器。
- 包括电极贴片感应器。
- 容易从模拟人身上移除及清理。
- 可与任何品牌的模拟人配合使用。
- 不含乳胶的硅基粘合剂。





PRESTAN专业自动体外除颤培训器升级版

SKU: PP-AEDT2-101

质量/耐用性/最接近真实的自动体外除颤器

- 此领先的自动体外除颤培训器，体积重量和真实AED相仿，给于高素质的真实体验。
- 可客制化选项来配合培训环境，包括儿童培训按钮。
- 清晰自信的语音提示。此外，也备有心肺复苏节拍提示，让学员容易跟上胸外按压速率。
- 可替换式的语言模块备有双语选择，并涵盖心肺复苏最新指南。
- 导师可自由选择是否要使用遥控器。在特定范围内，一个遥控器可控制多台自动体外除颤培训器。



转换语言设置只需一个简单的按钮。



场景模式按钮可迅速转换电击顺序（无须手动操作）。



三种音量选择：响亮，中等，柔和。



播放和暂停键来控制欲特别指导的时刻。

特点:

- 符合2015美国心脏协会[AHA]最新指南。
- 简单迅速的更新升级。
- 成人/儿童选择键。
- 双图形成人/儿童培训用电极贴片。
- 当进行点击时，电击按钮将会闪出亮光。
- 五种预设培训场景设置，配有清晰平稳的语音提示。
- 以提示音计算和提示，胸外按压速率的节拍。
- 全自动或半自动电击。
- 可选择设置或不设置胸外按压循环周期完成后的呼吸次数。
- 可购买遥控器（单独出售）。
- 电池寿命长，备有自动关机设置。
- 可替换的语言模块。
- 坚固的翻盖开口。





PRESTAN自动体外除颤超级培训器

SKU: PP-AEDUT-101

此款为培训用自动体外除颤器(AED)PRESTAN创造了首个，也是唯一一个全球通用的自动体外除颤培训器，符合2015指南，可依据指南进行更新升级。

PRESTAN自动体外除颤超级培训器设有双图形电极贴片，和独特的电极贴片感应系统，可自动感应电极贴片在模拟人身上的粘贴位置。此培训器将展现AED施救的真实状况，让学员能有逼真的培训体验。

此电极贴片持久耐用，可使用高达100次，也不会残留任何沾粘物。更换过程简单，价格非常实惠。

PRESTAN专业AED超级培训器是市面上唯一一个拥有“婴儿”按键的AED训器。这将让学员能体验具有真实感的培训。

容易操作的语音化菜单，让您能自行设定您的培训课程为全自动或半自动电击，一共有五种培训场景设置让您选择。同时，您可以选择开启或关闭心肺复苏胸外按压速率提示和人工呼吸指令。

特点:

- PRESTAN创造了首个，也是唯一一个全球通用的自动体外除颤培训器，符合2015指南，可依据指南进行更新升级。
- 播放/暂停键。
- 五种培训场景设置。
- 双图形（成人/儿童）培训用电极贴片。
- 电极贴片感应系统。
- 预先连接的电极贴片。
- 儿童培训按钮。
- 儿童AED特定语音提示。
- 全自动或半自动电击模拟情景。
- 心肺复苏培训“施行人工呼吸”语音提示。
- 开启或关闭胸外按压速率节拍提示。
- 开启或关闭“施行人工呼吸”语音提示。
- 电池电量低警告。



索引

P

- PRESTAN Ultralite® 超轻巧型 模拟人 4 件组合装 13
- PRESTAN Ultralite® 超轻巧型模拟人 6
- PRESTAN 儿童型模拟人 16
- PRESTAN 复苏罩接合器 12
- PRESTAN 婴儿型模拟人 17
- PRESTAN 婴儿型模拟人4 件组合套装 15
- PRESTAN 心肺复苏模拟人家庭组合套装 19
- PRESTAN 心肺复苏模拟人收藏系列 18
- PRESTAN 成人型模拟人 20
- PRESTAN 成人型模拟人4 件组合套装 14
- PRESTAN专业儿童型心肺复苏面罩/肺袋50片装 9
- PRESTAN专业儿童型心肺复苏面罩50片装 10
- PRESTAN专业婴儿型心肺复苏面罩/肺袋50片装 8
- PRESTAN专业成人型心肺复苏面罩/肺袋50片装 11
- PRESTAN专业成人型模拟人2000系列 1
- PRESTAN专业自动体外除颤培训师升级版 25
- PRESTAN专业自动体外除颤培训师升级电极板 24
- PRESTAN专业自动体外除颤培训师遥控器 23
- PRESTAN专业超轻巧型心肺复苏面罩/肺袋50片装 7
- PRESTAN自动体外除颤超级培训师 27
- PRESTAN自动体外除颤超级培训师电极板（4 对/袋） 22